


DEXIS Scan eXam™ One

Imaging intraorale digitale, veloce e affidabile



Dental Excellence per lo Studio odontoiatrico

Risoluzione di scansione 17 lp/mm. Profondità immagine a 16 bit

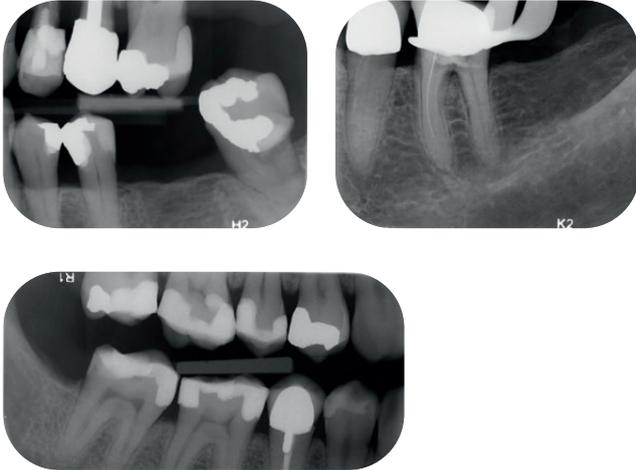

Opzionale: immagine occlusale 4C



One, perfetto per tutte le applicazioni intraorali

 ECCELLENTE QUALITÀ
DELLE IMMAGINI

 COPRE UN'AMPIA GAMMA DELLE
VOSTRE ESIGENZE DIAGNOSTICHE

 SUPPORTA IL
FORMATO OCCLUSALE 4C

 GARANTISCE RISULTATI
COSTANTI E DI ELEVATA QUALITÀ

Diagnostica intraorale avanzata

One, una soluzione per tutte le esigenze

Un'avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini digitali consente di ottenere risultati sempre costanti. Le impostazioni base del sistema, che già permettono di ottenere immagini di alta qualità, possono essere ulteriormente adattate alle diverse esigenze diagnostiche.



Accelerate le vostre acquisizioni in digitale

Eccellenti risultati in tempi brevissimi

Le immagini intraorali altamente dettagliate e con eccellente contrasto di DEXIS Scan eXam One riproducono con precisione i livelli di grigio, per una diagnosi completa ed accurata. È sufficiente inserire le lastre ai fosfori.



Semplicità di utilizzo per il paziente e comfort paragonabili ad una pellicola.



Comodo funzionamento frontale: richiede pochissimo spazio.

One, uno solo per tutte le vostre esigenze

Per DEXIS Scan eXam One sono disponibili lastre ai fosfori di diverse dimensioni e il dispositivo può essere utilizzato per tutte le radiografie bitewing, periapicali e occlusali. Le lastre sono semplici e flessibili, al pari di una pellicola tradizionale, e sono particolarmente adatte ai pazienti pediatrici.

Formato 0

22 x 31 mm
734 x 1034 Pixel
1,08 MB

Formato 1

24 x 40 mm
800 x 1334 Pixel
1,53 MB

Formato 2

31 x 41 mm
1034 x 1368 Pixel
2,03 MB


Formato 3

27 x 54 mm
900 x 1800 Pixel
2,32 MB



Il vostro flusso lavorativo

Semplice da posizionare come una pellicola

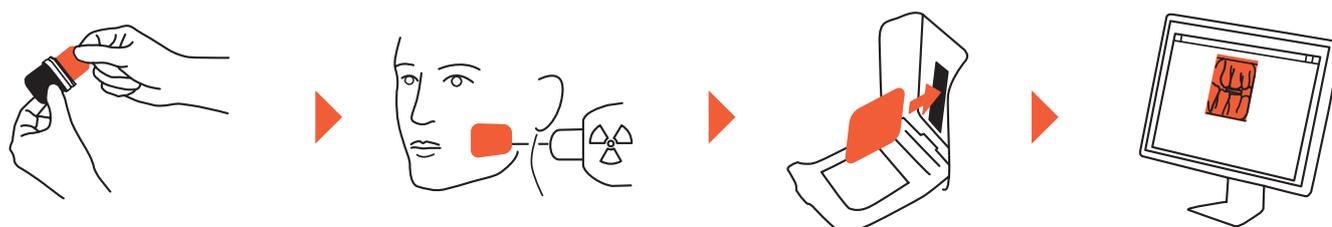

Flusso operativo rapido e semplice

Il sistema con lastre ai fosfori riutilizzabili Scan eXam One garantisce un flusso operativo semplice e comodo. L'intero processo, dalla lettura dell'immagine alla visualizzazione sullo schermo, richiede solo pochi secondi. Il sistema può essere utilizzato in un ambiente con luce naturale; non sono necessari agenti chimici.

Flusso operativo sicuro

Scan eXam One garantisce una maggiore sicurezza per il vostro flusso operativo visualizzando nome paziente e ID utente sul monitor. Il sistema di tracciabilità iDOT™ sulle lastre ai fosfori consente di identificare in modo univoco la lastrina utilizzata per una determinata immagine radiografica. Le lastre danneggiate possono essere individuate e sostituite in maniera semplice.



One, un'unica soluzione per più utenti

Uso alla poltrona o condiviso

DEXIS Scan eXam One è la scelta perfetta come soluzione per uso esclusivo alla poltrona permettendo la condivisione delle immagini con più operatori collegati in rete.

Design attraente



DEXIS Scan eXam One richiede poco spazio ed è caratterizzato da un gradevole design. È possibile scegliere tra cinque colori quello che più si adatta allo stile del proprio Studio.



Specifiche tecniche

Tecnologia	Lastrina ai fosfori riutilizzabile (lastrina ai fosfori fotostimolabili)
Dimensione pixel	30 μm / 60 μm , selezionabile
Risoluzione scansione	17 lp/mm
Profondità immagine	16 bit
Connessione	Connessione di rete standard (Ethernet RJ45), DHCP
Dimensioni	168 mm x 233 mm x 328 mm
Peso	4 kg (8 lb)
Voltaggio operativo	100-240 V CA, 50/60 Hz
Sistema operativo	Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10

Dimensioni

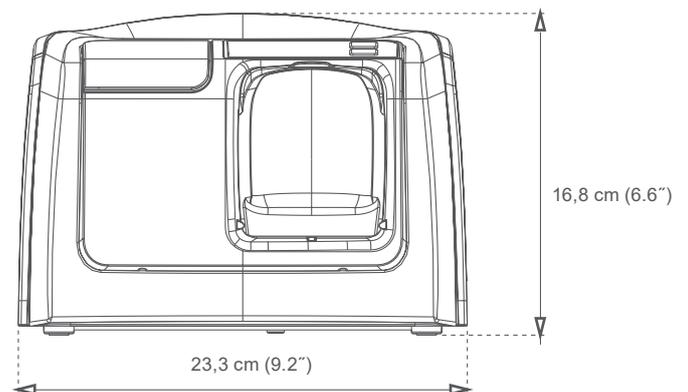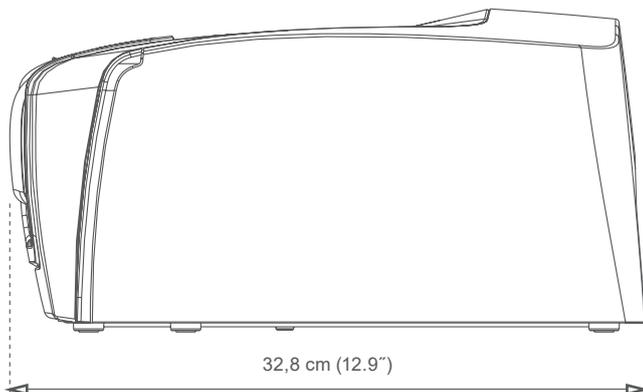

Trasformiamo **lo Studio Dentistico e** **il Sorriso dei Pazienti**

Progettando prodotti con l'obiettivo di migliorare la semplicità d'utilizzo da parte dell'operatore, DEXIS garantisce soluzioni per l'Imaging affidabili nel tempo in grado di fornire al clinico informazioni di estrema importanza per diagnosi precise e piani di trattamento predicibili.



PaloDEX Group Oy Nahkelantie 160, FI-04300 Tuusula, Finland