

Telecamera intraorale

YOUR VIEW. WHERE OTHERS CAN ONLY IMAGINE



Flussi di lavoro clinici efficaci
per cure all'avanguardia

C50



The acteon logo, featuring a stylized blue triangle icon followed by the word 'acteon' in a lowercase, sans-serif font.

Visualizzazione clinica eccezionale

FULL HD

Immagini chiare e dettagliate

- Diagnosi più sicura
- Maggiore accettazione dei trattamenti

VISION MODE

Immagini con colori naturali

- Facilità di comunicazione con il paziente
- Ottimo per la comparazione di macchie dentali e per la condivisione con il paziente

AUTO FOCUS

Risparmio di tempo & maggior chiarezza dell'immagine

- Facile da utilizzare per il clinico
- Maggiore comfort per il paziente

VISUALIZZAZIONE MACRO

Miglior visibilità della carie

- Facile valutazione clinica
- Migliore comunicazione tra professionista e paziente

PROFONDITÀ DI CAMPO

5 modalità* disponibili in UNA telecamera

- Dispositivo semplice da usare, per una migliore ergonomia di lavoro
- Quick switch: da una modalità all'altra in un secondo

*Le 5 modalità includono macro, ritratto, sorriso, denti e intraorale



Tutto quello che hai bisogno di vedere in punta di dita

Visione senza precedenti in modalità Daylight

- Migliore interpretazione delle ombre dentali grazie alla visualizzazione in colori naturali.
- Un aiuto nel controllo delle patologie e nel post-trattamento, semplificando il follow-up.



Performance esclusive grazie alla visualizzazione macro

- Visibilità estrema, per una diagnosi ultra-precisa.



Ma anche...

- Visione cristallina con una maggiore profondità di campo.
- Una sola telecamera per tutte le modalità: macro, intraorale, denti, sorriso e ritratto.




Miglior follow-up per i pazienti

- Più informazioni sul tuo paziente: età, stato di salute, dieta, igiene orale ecc.
- Fiducia duratura da parte del paziente.

Notevole versatilità clinica

Modalità di visualizzazione per una diagnosi dettagliata e più affidabile

MODALITÀ DAYLIGHT

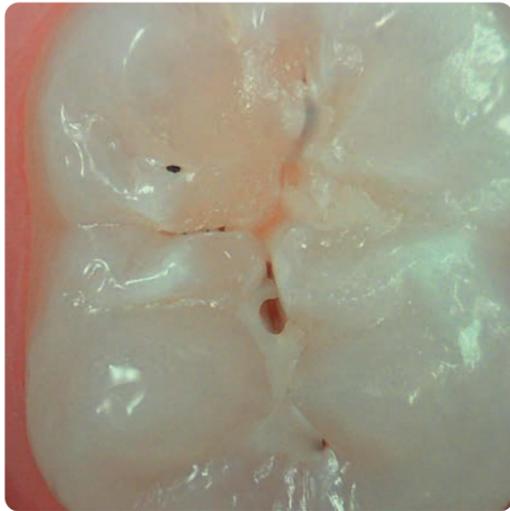

Registrazione dei **colori naturali** per una migliore interpretazione delle ombre dentali, identificazione delle patologie e follow-up paziente

MODALITÀ DAYLIGHT+



Alto contrasto che enfatizza le fessure anatomiche e i dettagli delle strutture dentali


Un sistema versatile per accedere a una vasta gamma di casi

MODALITÀ PERIO



Evidenziazione della **placca dentale** e dell'**infiammazione gengivale** grazie all'amplificazione cromatica

MODALITÀ CARIO

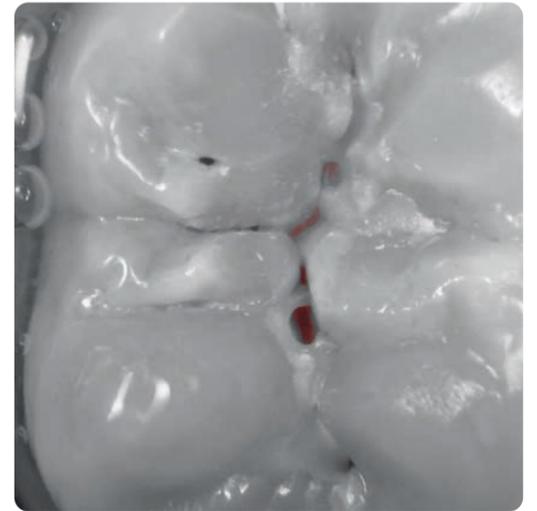

Detezione delle **carie grazie alla fluorescenza** con luce Led

Modalità telecamera per un completo follow-up del paziente



Follow-up quotidiani

Le modalità **Daylight** o **Daylight+**, ti aiuteranno a visualizzare i dettagli invisibili a occhio nudo o con un semplice specchietto. Queste modalità permettono al dentista di mostrare la differenza tra il "pre" e il "post" trattamento.




Follow-up ortodontico

La modalità ritratto spegne le luci led per catturare la foto frontale o laterale del paziente, assicurando il miglior follow-up ortodontico.



Grandissima libertà operativa

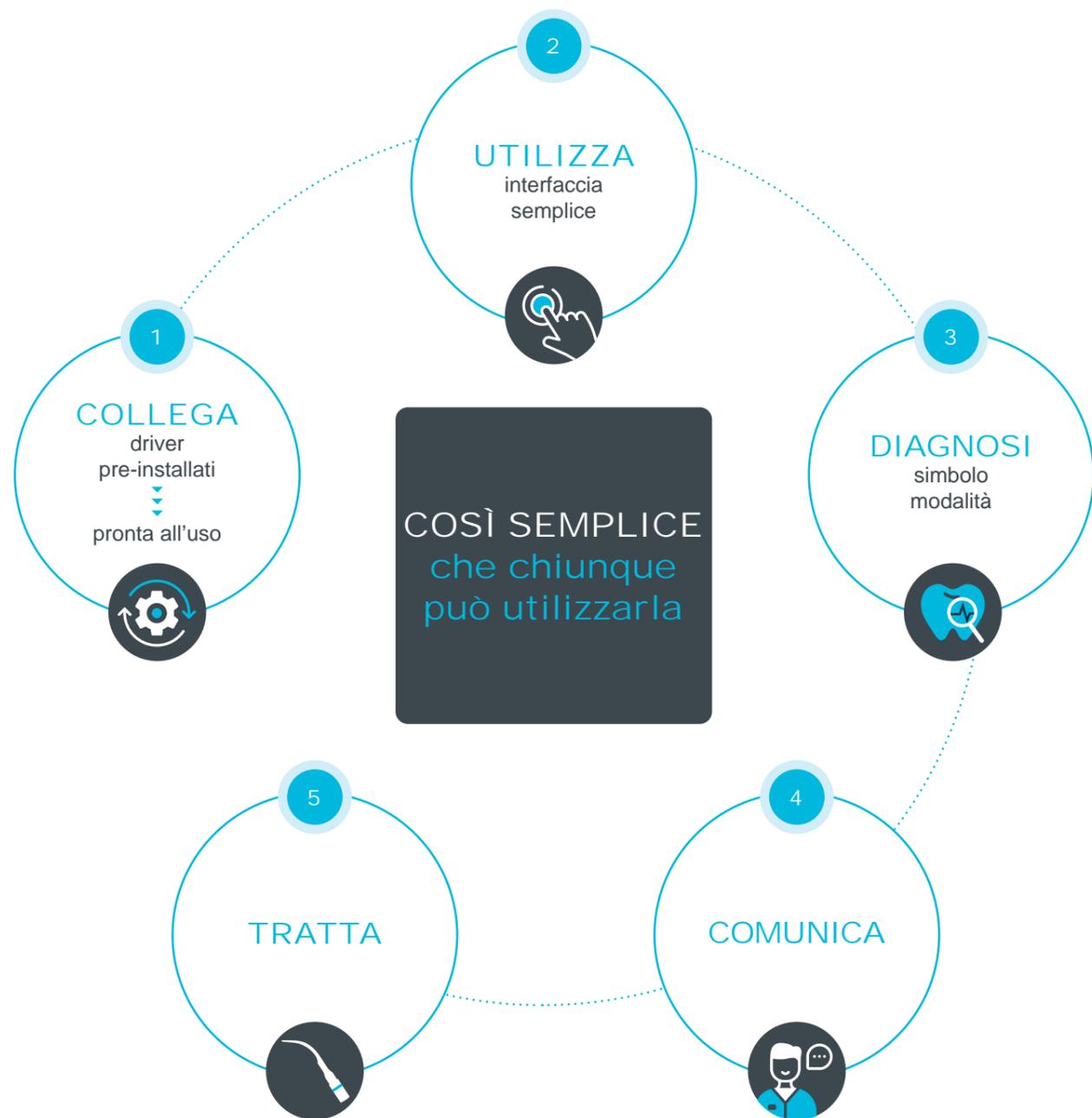

Completamente **compatibile**



Completamente aperta

Facilmente integrabile in qualsiasi software, senza alcuna perdita di tempo per l'installazione di strumenti di supporto

Liberati dalle costrizioni



Oltre ogni dettaglio

I pazienti si sentono più coinvolti capendo rapidamente l'importanza dei trattamenti previsti

Maggiore
accettazione
dei piani di
trattamento

Evidenzia patologie e spiega facilmente i piani di trattamento clinici. Semplifica il dialogo per rispondere a obiezioni e preoccupazioni del paziente

Comunicazione
con il paziente
migliorata

Fai piani di trattamento in modo efficace salvando le immagini direttamente nella cartella paziente. Compara comodamente immagini delle visite precedenti e monitora i progressi.

Fiducia
da parte dei
pazienti

**Focalizza la tua
attenzione su cosa
ti interessa di più: i
tuoi pazienti**





Workflow di deteazione della carie

Grazie alla gamma di prodotti ACTEON® puoi implementare un flusso di lavoro efficiente per la deteazione delle carie e il loro trattamento. Esso ti aiuta anche a comunicare in modo più efficace con i tuoi pazienti e ad aumentare la loro fiducia



Diagnosi

Vedo un gran numero di pazienti ogni giorno, pertanto il mio studio ha bisogno che io e il mio team siamo sempre al massimo della produttività.



C50

La telecamera intraorale C50 è la compagna perfetta per un'affidabile ma non invasiva rilevazione della carie, grazie alla sua tecnologia fluorescente.



Trattamento

Desidero eseguire un trattamento rapido e accurato, riducendo l'affaticamento della mano.



newtron

Grazie alle sue vibrazioni lineari e controllate e all'adattamento della frequenza, Newtron® P5XS B.LED permette di effettuare trattamenti precisi e di preservare i tessuti, rendendo il trattamento più confortevole sia per te sia per il tuo paziente.



Follow-up

Ho bisogno di eseguire i follow-up dei miei trattamenti minimizzando la dose ai miei pazienti.



**x-mind
unity**

**sopix
plug-in**

Posso garantire un follow-up più completo con una dose minore per i miei pazienti grazie all'X-MIND® unity con Sopix® Plug-in e alla sua tecnologia ACE®.



Protezione

Devo garantire una protezione clinica ottimale per i miei pazienti e limitare il rischio di contaminazione crociata.



riskontrol

I puntali monouso Riskontrol® sono la soluzione indispensabile per eseguire cure odontoiatriche in un luogo sicuro e pulito. Assicurano protezione, comfort e sicurezza in ogni procedura clinica quotidiana.

Specifiche tecniche

Sensore	CMOS
Risoluzione	1920 x 1080px
Sensività	2 lux
Frame per second (FPS)	25 – 30
Aspect ratio	16/9
Illuminazione	6 LED bianchi e 2 LED blu
Focus	Focus automatico o focus singolo
Modalità di visualizzazione	Versione solo luce bianca: modalità DAYLIGHT Versione diagnostica avanzata: modalità DAYLIGHT, DAYLIGHT+, PERIO, CARIO
Profondità di campo	Da ritratto a macro
Cattura immagine	Pulsante oppure pedale (opzionale)
Angolo di visualizzazione	75°
Lunghezza del cavo	3m
Uscita USB	3.0
Consumo	4.5W max
Dimensioni manipolo	L: 200; W: 30; H: 24mm
Peso manipolo	100g
International Protection Marking (IP)	Protezione da polvere e acqua IP53

Requisiti minimi computer

Requisiti computer	Specifiche
CPU	Intel Core i5 4 core 2GHz Gen 8 or superiori e Apple M1 o superiori
RAM	8GB
versione USB	3.0 o superiori
USB chipset	Intel o Renesas
Sistema operativo	da Windows 10 PRO 64 bits o macOS Catalina

Dispositivo medico di classe I per le cure odontoiatriche. CE. Per uso esclusivo professionale in odontoiatria.
 Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso
 Produttore: Sopro® ACTEON® Group (France)
 Data di creazione: Marzo 2023





DTU Srl
Via Pietro Redaelli, 11
20146 Milano
Tel.: 02 45 49 3397
Mail: info@dtudental.com